

温熱 Kii caldo

一般医療器機 家庭用温熱パック 届出番号 40B2X00011000001

温熱治療

血行を良くする
胃腸の働きを活発にする



最高温度約
※1 65℃

Warm the center

お腹や腰を温めるアイテム

※1:本測定にはKii温シート(1mm)を使用し、厚さ0.3mmの銅板とKii温シート(1mm)の間の温度を測っています

高温で約20分温め続ける!



- 火を使わない
衣服を燃やしません
- 臭いが無い
お部屋の香りそのまま
- お手入れなし
面倒な片付けはありません

Kii caldoで血行促進



「温熱 Kii caldo」ご使用の手引き


切り口に沿って開封する



袋から発熱剤(Kii caldo)を取り出す



発熱剤(Kii caldo)を Kii 温boxに入れる

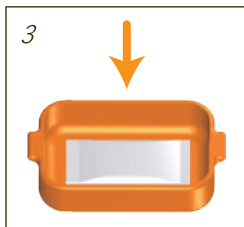


水蒸気と水素が出ます! アロマオイルでリラックス!




Kii 温box内側の目盛に合わせて常温の水を入れる



Kii 温boxにフタをする(発熱がすぐに始まります)

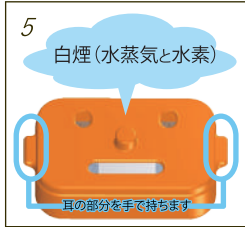

衣服上にタオルを敷いて、お腹・背中・腰など安定した場所にKii 温boxを置く

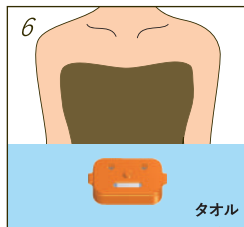

AD

Made in Japan

- ❗ 気持ちよい温度になるように「Kii 温シート」で調節してください
- ❗ 開始から5分・10分など数回 温度の状態を確認しましょう

※(4~6) 発熱後のお湯をこぼさないように注意して行ってください

温熱 Kii caldo

一般医療器械 家庭用温熱パック 届出番号 40B2X00011000001

温熱治療

血行を良くする
胃腸の働きを活発にする



最高温度約
※1 65℃

Warm the center

お腹や腰を温めるアイテム

※1:本測定にはKii温シート(1mm)を使用し、厚さ0.3mmの銅板とKii温シート(1mm)の間の温度を測っています

高温で約20分温め続ける!



- 火を使わない
衣服を燃やしません
- 臭いが無い
お部屋の香りそのまま
- お手入れなし
面倒な片付けはありません

Kii caldoで血行促進



「温熱 Kii caldo」ご使用の手引き


切り口に沿って開封する



袋から発熱剤(Kii caldo)を取り出す



発熱剤(Kii caldo)をKii 温boxに入れる

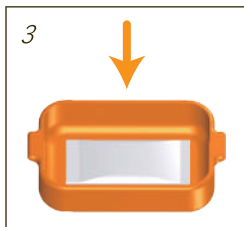

水蒸気と水素が出ます! アロマオイルでリラックス!




Kii 温box内側の目盛に合わせて常温の水を入れる



Kii 温boxにフタをする(発熱がすぐに始まります)



衣服上にタオルを敷いて、お腹・背中・腰など安定した場所にKii 温boxを置く

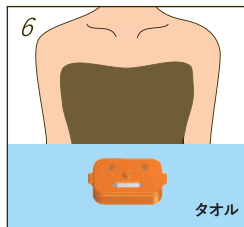

AD

Made in Japan

- ❗ 気持ちよい温度になるように「Kii 温シート」で調節してください
- ❗ 開始から5分・10分など数回 温度の状態を確認しましょう

※(4~6) 発熱後のお湯をこぼさないように注意して行ってください