

オームパルサー

最新のOhm Pulserは 多彩な治療ができる 最上位モデル



標準セット品
本体 / 探索用コード (1)
みの虫クリップコード DIN (4)
電源コード・ACアダプター (1)



鍼通電

TENS

つぼ探索

美容

マイクロカレント/微弱電流

オームパルサー

Ohm Pulser LFP-2000e

低周波治療器・鍼電極低周波治療器・
治療点探索測定器組合せ理学療法機器
特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 226AGBZX00098000

本体の寸法及び重量	寸法:215mm(W)×138mm(D)×43mm(H)±10%・重量:500g
治療点探索機能	最大出力電圧:24V ±25%・最大出力電流:0.42mA±25%
低周波機能	最大周波数:100Hz ±10%・最大出力波高値:90Vp-p ±25% (負荷抵抗2kΩ)
最大出力電流(実効値)	20mArms 以下(負荷抵抗500Ω 周波数100Hz)
パルス幅	0.25ms ±15%・パルス波形:非対称両極パルス波
治療タイマー	最大30分 ±5%・出力モード:連続モード、間欠モード、疎密モード

変化が数値
でわかる

計測機能

治療前・治療後の変化が
数値による視覚化で
わかりやすくなりました。

(LFP-2000e 計測モニター)

1: 0.02mA
2: 2.06mA

微弱電流に
調整できる

マイクロカレント

微弱電流は一般的に
0.01~0.02mAくらいです。
身体のケアに役立ちます。

(LFP-2000e 計測モニター)

1: 0.02mA
2: 0.01mA

1/f ゆらぎ
モード搭載

S-mixed機能

人間が心地よいと感じる
リラックス効果の高いリ
ズム。


(炎のゆらぎ・川のせせらぎなど)



新しい治療
アイテム

電気でいしん

触診で感じた「むくみ」や
「硬化」した場所にあてて、
皮下から筋層にかけて通
電刺激ができるアイテム。

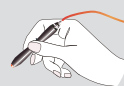

明確に細かく
設定できる

デジタル表示

設定、計測、つぼ探索を
数値や目盛で表示します。

設定時間 / 経過時間

電流量 (mA) 実測数値

周波数 (Hz) / 電流荷 (C)

つぼ探索 / 音量



電気治療をもっと自由に。



※オプション品

『狙った筋肉を動かす!』動画シリーズ

Scan the QR code

ヒラメ筋



大殿筋



円回内筋



棘上筋



脊柱起立筋



YouTube 基本操作編
Ohm Pulser LFP-2000e

how to use



ZEN 株式会社全医療器
Health is a bridge to the future

〒811-1352 福岡県福岡市南区鶴田 3-16-7

販売店