

“変えない”

こだわり

特定保守管理医療機器(クラスII)
医療機器承認番号:15800BZZ00963000



Ohm Pulser LFP-4000A 標準セット品



- ・みの虫クリップコード(4)
- ・スポットゴム電極(10)
- ・出力チェックイヤホン(1)
- ・単2電池(4)

オームパルサー

鍼電極低周波治療器

Ohm Pulser LFP-4000A

設計・製造・販売
自己完結一貫性

設計=販売

生産体制の流れを一元化することで、顧客満足度と商品のクオリティを高める取組みをダイレクトに反映できます。

経皮電極でも
十分なパワー

70^{Vp-p}以上


最大出力が70Vp-p以上なので経皮電極治療としても十分なパワーで治療を支え低電圧の安定性も高めます。

ソフトな刺激



パルス幅(ms)は、短い(低い数値)の方がソフトな刺激になります。

非対称両極パルス波

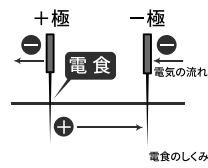


双方向に電流が流れる両極パルス波を採用(交流波)。両極の波形のバランスによって鍼の電食を抑え、経皮への刺激を抑えています。

陰陽を用いた治療






非対称両極パルス波により陰陽を用いた治療が行えます。一般的に、陰(一極)、陽(+極)と考えられていますので、陰陽のバランスを考えながら治療ができます。

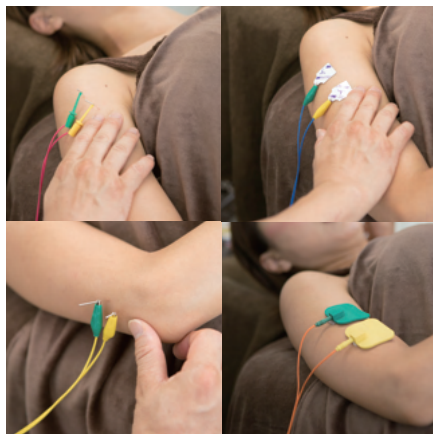

出力数	4 極	周波数	連続波 0.5 ~ 100Hz/ 断続波 5 ~ 100Hz/ 疎密波 3 or 20Hz
出力波形	非対称両極パルス波(出力極性 -)	電源	DC6V (単II電池 4 本) ※電圧1.15 ~ 1.2V の電池は交換
断続波	通電時間 2.3 秒 / 休止時間 2.3 秒	安全回路	誤操作防止安全回路(誤操作時赤色 LED 点灯)
タイマー	0~30分 or 連続	本体サイズ	H105×W190×D150mm 1.5kg
最大電流	20mA 以下 (500Ω負荷時)	強度切替	強 (0 ~ 70Vp-p)/ 弱 (0 ~ 35Vp-p) 2kΩ負荷時での波高値目安※1
出力音	固定(パルス出力時に、音を出力)		※1新品のマング干電池使用した場合での波高値目安

付属品の選択で「もっと」治療が広がる

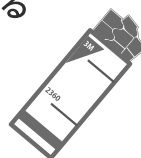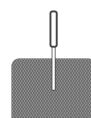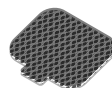

ZEN 株式会社全医療器
Health is a bridge to the future

〒811-1352 福岡県福岡市南区鶴田 3-16-7

販売店